


**INDICACIONES**  
Movilidad postoperatoria mejorada

Lea completamente la siguiente información antes de usarlo  
Para el buen funcionamiento del producto se requiere que se coloque correctamente

**A Verificar el tamaño**

**adecuado:**  
Colocar el pie en el zapato para verificar el tamaño adecuado (fig. 1).


Fig. 1

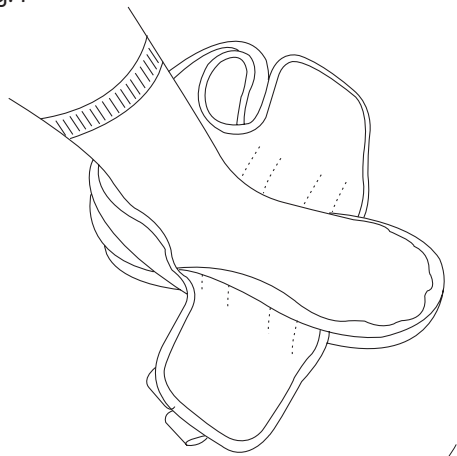

**B Fijar el cierre de Velcro®:**

Colocar y cerrar las cintas de Velcro® en la secuencia indicada (fig. 2).


Fig. 2

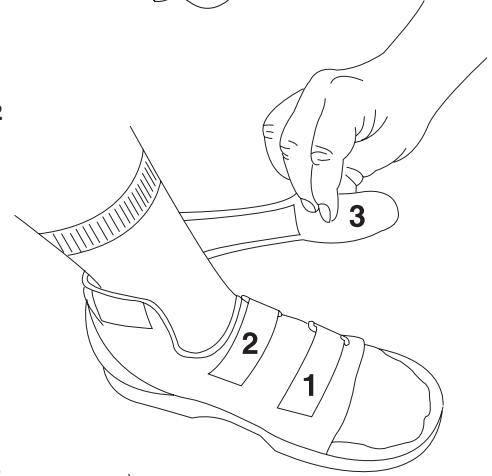

**C Colocar las cintas para obtener un ajuste adecuado:**

Ajustar todas las cintas hasta que el paciente las sienta cómodas y seguras. La figura 3 representa el zapato postoperatorio de borde bajo cuando está totalmente aplicado.

Fig. 3

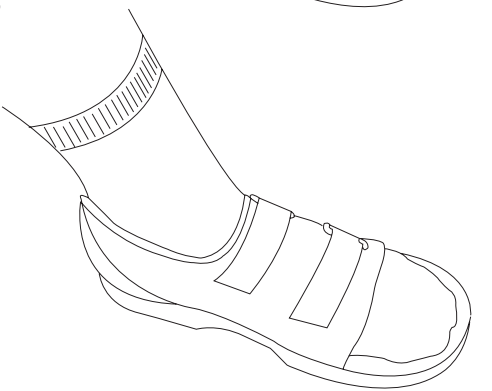

**INSTRUCCIONES DE CUIDADO**

Lavar a mano usando agua fría y un detergente suave. No utilice blanqueador. Enjuague completamente extrayendo todo residuo del detergente para evitar irritaciones de la piel. Deje SECAR AL AIRE. No exprima ni estruje, dele forma y póngalo a secar plano.

**ADVERTENCIA: SE DEBE REPORTAR A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE CUALQUIER INCIDENTE DE DOLOR, INFLAMACIÓN, CAMBIOS EN LA SENSIBILIDAD O REACCIONES INUSUALES.**

EL FABRICANTE NO GARANTIZA QUE EL USO DE ESTE PRODUCTO EVITE QUE SE PRODUZCA UNA LESIÓN

R000343  
H/Q

Copyright © 2007 Professional Products, Inc.  
**www.ezywrap.com**  
International (850) 892-5731 Fax (850) 892-5990  
USA and Canada (800) 234-9004 Fax (800) 274-9006  
54 Hugh Adams Road • DeFuniak Springs, Florida USA 32435



**The Post-Op Healing Shoe**



## INDICATIONS

Enhanced Post-Op mobility

Thoroughly read the following information prior to application.  
Product function requires proper application.

**A Check for proper sizing:**

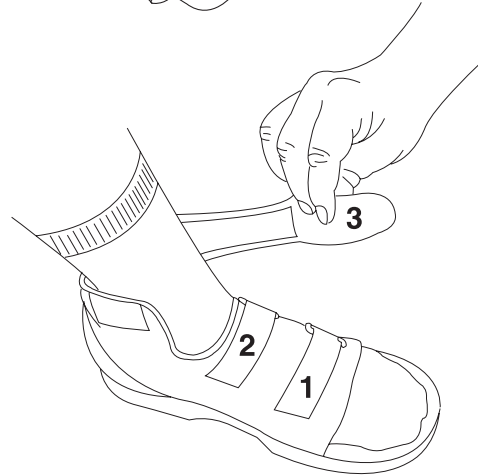
Place foot in the shoe, to check for proper sizing (Fig. 1).

Fig. 1

**B Secure Velcro® closure:**


Attach and close the Velcro® straps in the sequence indicated (Fig. 2).

Fig. 2

**C Adjust straps for proper fit:**

Adjust all straps until they feel comfortable and secure. Figure 3 represents the Low Top version Post-Op Shoe when fully applied.

Fig. 3

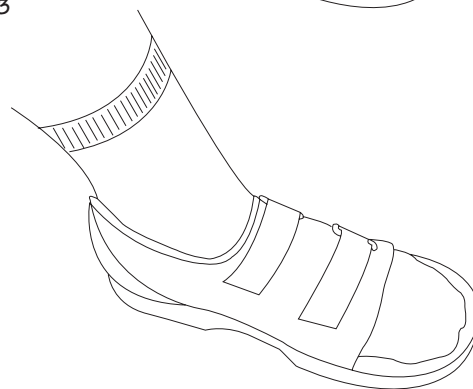

## CARE INSTRUCTIONS

Hand wash using cold water and mild detergent. Do not bleach. Rinse thoroughly, removing all soap residue to avoid skin irritation. Allow to AIR DRY. Do not twist or wring, reshape, dry flat

**WARNING: INCIDENTS OF PAIN, SWELLING, CHANGES IN SENSATION OR UNUSUAL REACTIONS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO YOUR MEDICAL PROFESSIONAL.**

MANUFACTURER MAKES NO GUARANTEES THAT INJURY WILL BE PREVENTED USING THIS PRODUCT.

## ANZEICHUNGEN


Verbesserte Mobilität nach der Operation

Folgende Informationen vor Gebrauch sorgfältig lesen.  
Funktion des Produkts setzt ordnungsgemäße Anwendung voraus.

**A Auf richtige Anpassung**


**achten:**  
Den Schuh über den Fuß ziehen, um zu prüfen, ob die Größe richtig ist (Abb. 1).

Abb. 1

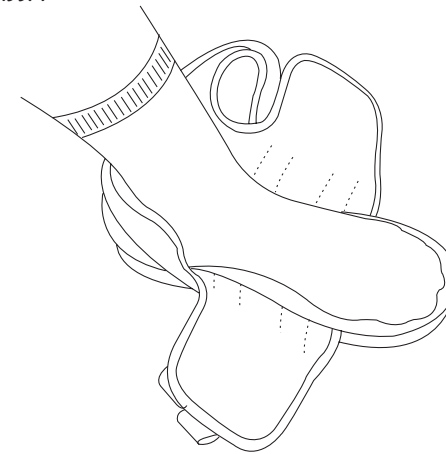**B Velcro® Verschluss schließen:**

Die Velcro® Riemen in der angezeigten Reihenfolge befestigen und schließen (Abb. 2).

Abb. 2

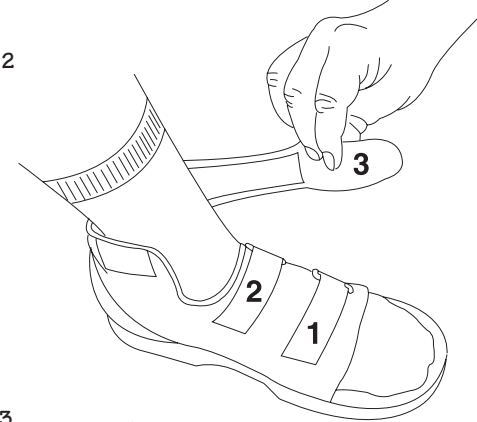**C Riemen passgerecht einstellen:**

Alle Riemen so einstellen, dass sie bequem und sicher sitzen. Abbildung 3 zeigt den richtig angelegten Post-Op Schuh mit niedrigem Schaft.

Abb. 3



## PFLEGEANLEITUNG

Handwäsche in kaltem Wasser mit mildem Waschmittel. Keine Bleichmittel verwenden. Zur Vermeidung von Hautreizungen alle Seifenreste gründlich ausspülen. Nicht auswringen. In Form ziehen und liegend lufttrocknen.

**WARNHINWEIS: BEI SCHMERZEN, SCHWELLUNGEN, VERÄNDERTER EMPFINDUNG BZW. UNGEWÖHNLICHEN REAKTIONEN DEN ARZT SOFORT VERSTÄNDIGEN.**

DER HERSTELLER GARANTIERT NICHT, DASS VERLETZUNGEN DURCH VERWENDUNG DIESES PRODUKTS VERMIEDEN WERDEN.

## INDICATIONS


Accroissement de la mobilité postopératoire

Lire attentivement les informations suivantes avant utilisation.  
Le bon fonctionnement de ce produit requiert une mise en place correcte.

**A Vérifier que la pointure est correcte :**


Placer le pied du patient dans la chaussure pour vérifier que la pointure soit correcte (Fig. 1).

Fig. 1

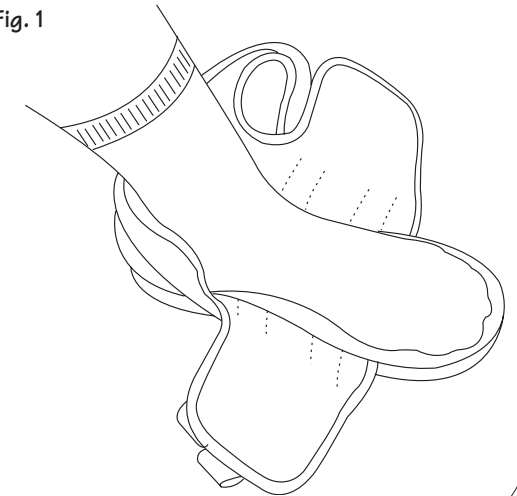**B Attacher la fermeture en Velcro® :**


Attacher et fermer les lanières en Velcro® dans l'ordre indiqué (Fig. 2).

Fig. 2

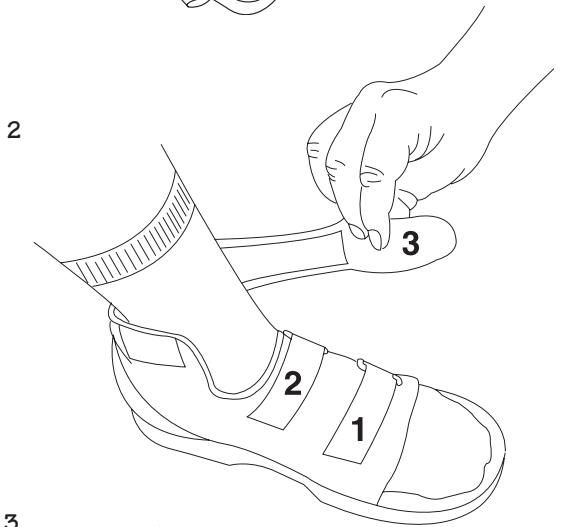**C Ajuster les lanières pour que la chaussure épouse bien le pied :**

Ajuster toutes les lanières de manière à ce qu'elles soient bien serrées tout en restant confortables. La Figure 3 présente la version de la chaussure postopératoire mise en place.

Fig. 3

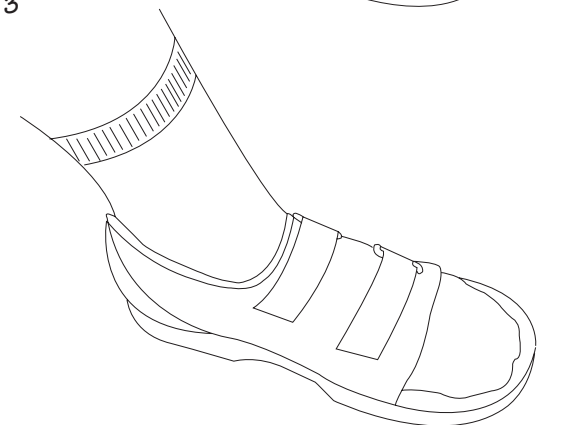

## ENTRETIEN

Laver à la main à l'eau froide et au savon doux. Ne pas javelliser. Rincer soigneusement, afin d'éliminer toute trace de détergent qui pourrait provoquer l'irritation de la peau. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas tordre. Mettre à plat pour lui redonner sa forme.

**AVERTISSEMENT : CONSULTER IMMÉDIATEMENT LE MÉDECIN TRAITANT EN CAS DE DOULEURS, DE GONFLEMENTS, DE MODIFICATIONS DES SENSATIONS OU DE RÉACTIONS INHABITUELLES.**

LE FABRICANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT EMPÊCHERA TOUTE BLESSURE DE SE PRODUIRE.