

30-40
mmHg

PHASES INTENSIVE
ET MAINTIEN

DIURNE - NOCTURNE

STADES 2 ET 3

INDICATIONS

- LYMPHŒDÈME
DU MEMBRE INFÉRIEUR
- ŒDÈME DE LA JAMBE
- ŒDÈME DU PIED

SIMPLE D'UTILISATION

- Application autonome et ajustements
aisés par lanières à scratches
- Entretien facile

PERSONNALISABLE

- Adaptable au volume du membre
- Compression appliquée ajustable

Combinaison d'une enveloppe extérieure apportant la rigidité nécessaire à l'efficacité thérapeutique et d'une doublure de mousse striée favorisant le drainage de la lymphe et le massage des tissus sous-cutanés

Fiche de prise de mesures et informations détaillées à télécharger sur www.sigvaris.com

UTILISATION POSSIBLE AVEC



COMPREBOOT PLUS
(voir page 56)

MEDAFIT BELOW KNEE

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LA JAMBE



ENVELOPPE
RIGIDE



LANIÈRE
À SCRATCHS



MOUSSE
STRIÉE



INCLUS

- Dispositif de compression ajustable pour la jambe MEDAFIT
- Paire de chaussettes protectrice en coton

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

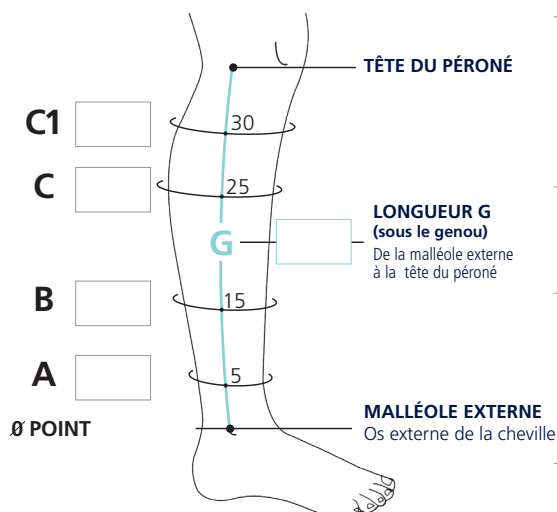


TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL			MEDIUM			LARGE		
Circonférences	C1	32-42			38-48			42-52		
	C	29-39			34-44			39-49		
	B	24-34			29-39			33-43		
	A	20-29			21-30			25-36		
Longueur		COURT	NORMAL	LONG	COURT	NORMAL	LONG	COURT	NORMAL	LONG
	G	25-29,9	30-35,9	36-42	25-29,9	30-35,9	36-42	25-29,9	30-35,9	36-42
		XLARGE			XXLARGE					
	C1	51-61			58-68					
Circonférences	C	48-58			55-65					
	B	41-51			44-55					
	A	32-42			33-43					
	Longueur		COURT	NORMAL	LONG	COURT	NORMAL	LONG		
G		25-29,9	30-35,9	36-42	25-29,9	30-35,9	36-42			

Les chiffres (5, 15, 25, 30) indiquent la hauteur (en cm) par rapport au point Ø à laquelle prendre la mesure de circonférence

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

CODES ACL

	COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
JAMBE DROITE	Noir/Bleu	COURT	0745129306694	0745129306731	0745129306762	0745129306793	0745129306823
	Noir/Bleu	NORMAL	0745129306687	0745129306724	0745129306755	0745129306786	0745129306816
	Noir/Bleu	LONG	0745129306717	0745129306748	0745129306779	0745129306809	0745129306830
JAMBE GAUCHE	Noir/Bleu	COURT	0745129306540	0745129306571	0745129306601	0745129306632	0745129306663
	Noir/Bleu	NORMAL	0745129306533	0745129306564	0745129306595	0745129306625	0745129306656
	Noir/Bleu	LONG	0745129306557	0745129306588	0745129306618	0745129306649	0745129306670

CONSEILS D'UTILISATION

- Enfiler la chaussette protectrice en coton
- Desserrer les lanières à scratch
- Enfiler MEDAFIT BELOW KNEE sur la jambe jusqu'au dessous du genou en s'aidant de la poignée d'aide à l'enfilage
- Si utilisation d'un COMPREBOOT PLUS
- Enfiler COMPREBOOT PLUS (voir page 56)
- Insérer la partie supérieure de COMPREBOOT PLUS sous le MEDAFIT BELOW KNEE au niveau de la cheville
- Serrer les lanières à scratchs de MEDAFIT BELOW KNEE en commençant par la cheville et en remontant jusqu'en dessous du genou. Chaque lanière est repositionnable pour améliorer le confort de l'utilisateur